

持ち運びのできる本格岩盤浴ホットパック

高い遠赤外線放射率を誇る、厳選の天然鉱石「温光石」を使用。 じんわりポカポカ心地よい "あたためほぐし" を、いつでもどこでも。

じんわり心地よい "あたためほぐし"のヒミツ

手軽に使えて身体にフィット!効率良く温めます。

専門スタッフが施術を行う鍼灸整骨院やエステサロンから、セルフでサービスを提供する施設まで、 持ち運びのできる本格岩盤浴ホットパック、HEATRAY「ウォームストーンパック」を、ぜひご活用ください。 厳選の天然鉱石 [温光石] (弊社名) を使用



凝りやすい肩に

関節痛の 出やすいとザに

冷えやすいお腹に

腰ゃふくらはぎに

負担のかかりやすい 大きな血管やリンパ節のある 足の付け根に

スマートフォンや パソコン仕事でお疲れの 目元のケアに













持ち運びに便利! コードレスタイプなので、

場所やシーンを問わずカンタンに、「〇〇しながら利 用」が可能です。

体の芯まで 温まります!

岩盤浴と同じく遠赤外線作 用が働きますので、15~ 20分当てると体の深部ま で温まります。

電子レンジ 使用可能!

電子レンジが使用可能な ので、急な施術にもスピー ディに対応できます。

お洗濯も スムーズ!

袋が二重構造なので取り 替え簡単。お洗濯もスム ズに行えます。

導入が手軽!

設置に特別な技術は必要 ありませんので、手軽にご 導入いただけます。

設置も、お手入れも簡単!どこでも使えるコードレスタイプ



手軽に導入できてサービスカアップ! 様々な施設で使用できます。

HEATRAY「ウォームストーンパック」は、遠赤外線を放射する天然鉱石を、体に フィットする大きさ・形状にして、専用の二重構造の耐熱袋に封入したホットパックで す。持ち運びに便利なコードレスタイプで、ウォーマー(タオルウォーマー・ホットキャビ 等)と併せて電子レンジによるあたためも可能。場所やシーンを問わず、業務用途か ら、ご自宅で手軽に体を温める個人用途まで、カンタン・スピーディに温熱効果を味わ える、持ち運びのできる本格岩盤浴ホットパックです。

おすすめ設置場所・施設等別の詳細は、下記本ームページにて

デイサービス/鍼灸院・整骨院/エステサロン/フィットネスクラブ ゴルフ場/企業のリラクゼーション・リフレッシュルーム/一般家庭など

HEATRAY「ウォームストーンパック」の特徴

厳選された天然鉱石

「温光石」(弊社名)を使用。

天然鉱石には、遠赤外線の放射率が高く、健康維持に有 益なごく限られた波長帯の育成光線を優先的に放出する 「温光石」(弊社名)を使用しています。この天然鉱石が、 HEATRAY「ウォームストーンパック」の"あたためほぐし"の肝 で他とは一線を画する、"体を芯から温め、かつ冷めにくい"、 "自然な心地よい温かさ"を生み出します。

岩盤浴鉱石各種 遠赤外線放射率比較データ

測定: (財)日本染色検査協会 ※6~20μm平均積分放射率	遠赤外線積分放射率
天然鉱石(温光石)	93.0
天然鉱石 A	87.1
天然鉱石 B	89.2
天然鉱石 C	88.4

「温光石」は弊計取扱製品の濡れない足湯



体にしっかりフィットする、 コードレスタイプのホットパック。

持ち運びに便利なコードレスタイプの4つのサイズのホット パックをご用意。"寝ながらお腹を温める""足浴をしながら 凝った首や肩に当てる"など、シーンを問わずカンタンに、 ○○しながら利用が可能です。いつでもどこでもじんわり ポカポカ心地よい"あたためほぐし"を味わえます。



袋が二重構造で取り換えカンタン。 お洗濯もスムーズ。

袋は天然鉱石の入った密封式の内袋と、ファスナー付きの 外カバー(アイケア用はファスナーなし)の二重構造になっ ています。汚れたときなどのお洗濯もスムーズに行えますの で、清潔さを保て、メンテナンスにかかる手間を軽減できます。



雷子レンジの使用もでき すぐの対応にも可!

電子レンジによるあたため が可能なので、急な施術が 入った場合など、すぐに使い たいときに、スムーズかつ スピーディに対応できます。



- ■目安として、600W・2分程度(ワンポイント用は1分程度・アイケア用は10~ ロメこい 、、OUUW・2が柱度(ソンホイント用は1分程度・アイケア用は1 20秒程度)で心地よい温度になります(季節や設置環境、電子レンジの により差異あり)。
- により産業あり。 一冷めきっていない状態から追加で温める際には、短い時間(10秒ずつ程度)に 設定して温めてください。 一必ず外カバーに入れた状態で温めを行ってください(内袋のみを温めないよう
- にしてください)
- 電子レンジのオート加熱機能での温めは、絶対に行わないようにしてください。 ■施設など頻繁に温めを行う必要が生じる業務用途でのご利用の場合は、 基本はウォーマーをご用意ください。

その他、電子レンジを使用する場合のご注意は、 公式ウェブサイトのよくある質問をご参照ください

使用方法も楽々! 設置もカンタン。

設置作業に特別な技術は必要ありません。お手持ちの ウォーマーに「ウォームストーンパック」を収納して電源を入 れるだけのカンタン作業で行えます。

- ■ウォーマー(タオルウォーマー・ホットキャビ等)は温める機能が備わっていれば 種類は問いません。施設権の規模に合ったサイズのものをご用意ください。 ■「ウォームストーンバック」が、心地よい温かさが得られる温度になるまでの所 要時間(目安)等は、公式ウェブサイトのよくある質問をご参照ください。



専用外カバー(交換用)

型番

WSPCV-001

WSPCV-002

WSPCV-003

WSPCV-004



希望小売価格

1,760円(税別 1,600円)

2.090円(税別 1.900円)

1.430円(税別 1.300円)

1,100円(税別 1,000円)

製品ラインナップ 部位に合わせた4種の形状のホットパックをご用意しています。



HEATRAY 「ウォームストーンパック |

製品名	型番	希望小売価格	サイズ(W×L/mm)	天然鉱石重量
お腹・腰用	WSP-001	11,330円 (税別 10,300円)	約200×250mm	約1,076g
首·肩用	WSP-002	15,950円 (税別 14,500円)	約505×140mm	約1,350g
ワンポイント用	WSP-003	6,600円 (税別 6,000円)	約183×130mm	約450g
アイケア用	WSP-004	4,950円 (税別 4,500円)	約215×100mm	約269g

※サイズ・重量等は、予告なく変更となる場合があります。予めご了承ください。


◆HEATRAY「ウォームストーンパック」は、インターネット上での販売は弊社直営のユメロン黒川ネットショップでのみ行っております。



株式会社ユメロン黒川

tel.0778-24-0500



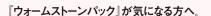

製品名

ワンポイント用

お腹・腰用

首·肩用

最新情報・導入事例・FAQなど詳細は



https://heatray-warmstone.com/